

Rat ICAM-1/CD54 ELISA 试剂盒

产品编号# CRE0031 (48/96 孔)

适用于大鼠血清、血浆或细胞培养上清液等样本

仅供研究，不用于临床诊断。



客服热线: 400-7060-959 * 技术支持邮箱: tech@4abio.com
公司官网: www.4abio.net

目录

简介	- 3 -
检测原理	- 3 -
试剂盒组分	- 4 -
储存条件	- 5 -
其他实验材料 (不提供, 但可协助购买) :	- 5 -
注意事项	- 5 -
样本收集处理及保存方法	- 6 -
试剂准备	- 6 -
操作步骤	- 8 -
操作流程图	- 8 -
操作要点提示	- 8 -
结果判断	- 9 -
结果重复性	- 9 -
灵敏度	- 10 -
特异性	- 10 -
参考文献	- 10 -

➡ 该产品由**北京四正柏生物科技有限公司**研制。

➡ 请根据试剂盒中所附说明书指引进行实验。

简介


大鼠细胞间粘附分子1 (ICAM-1)，也称为CD54，是在多种细胞类型上表达的80-110kDa，I型跨膜糖蛋白。该分子长度为545个氨基酸，并且含有27个氨基酸信号序列，466个氨基酸胞外区，25个氨基酸跨膜区段和27个氨基酸胞质区。胞外区含有5个Ig样结构域和11个潜在的N-连接的糖基化位点。第一个N-末端Ig结构域 (D1) 结合LFA-1 (淋巴细胞功能相关抗原1型)，而第三个结构域 (D3) 结合Mac-1 (也称为整联蛋白 α -M)。细胞质结构域虽然短，但可以转导细胞内信号 (通过MAP激酶) 并与细胞骨架产生相互作用。虽然膜ICAM-1作为二聚体存在，但单体ICAM-1也有能力结合LFA-1。可溶形式的ICAM-1通过蛋白 (MMP-9和弹性蛋白酶) 水解加工产生。可溶性的二聚体ICAM-1以高亲合力循环和结合LFA-1。在小鼠中，存在许多缺乏各种Ig结构域的ICAM-1可变剪接形式，表明多种截短形式有通过蛋白水解产生循环ICAM-1的可能性。由于成熟大鼠ICAM-1显示与小鼠ICAM-1的77% 氨基酸序列同一性，因此可能存在相似的剪接模式。成熟大鼠ICAM-1在人，犬和猪ICAM-1的氨基酸水平分别为52%，53%和49%相同。

已知表达ICAM-1的细胞包括平滑肌细胞，角质形成细胞，内皮细胞，成纤维细胞，支气管上皮细胞，记忆T细胞，B细胞，浆细胞，单核细胞，巨噬细胞，CFU-E，CFU-GM，活化的嗜酸性粒细胞和嗜中性粒细胞，雪旺细胞，支持细胞，黑素细胞和树突细胞。ICAM-1存在至少四种已知的配体 (或共同受体)。这四个中的两个是整联蛋白LFA-1/ α L β 2 (CD11a / CD18) 和Mac-1/ α M β 2 (CD11b / CD18)。 β 2整联蛋白受限于优先表达LFA-1的淋巴细胞和白细胞，还受限于表达LFA-1和Mac-1的NK细胞，嗜中性粒细胞和单核细胞。第三种配体是CD43 / sialophorin，第四种配体是纤维蛋白原。

ICAM-1是通常可诱导的跨膜分子，其在细胞迁移，抗原呈递和白细胞活化中起作用。当与其主要受体LFA-1结合时，ICAM-1可以具有多达三种效应。第一，它可以提供锚定到表达LFA-1的细胞上。在炎症期间，表达ICAM-1的内皮细胞 (EC) 介导循环LFA-1 + 白细胞的粘附和跨内皮迁移。此外，APC ICAM-1和T细胞LFA-1可以产生在抗原-限制 (antigen-limiting) 条件下延长有效抗原呈递的粘附界面。第二，ICAM-1连接 (ligation) 可以诱导对ICAM-1表达细胞的单一效应。EC ICAM-1的传输会激活细胞内Rho的信号，导致细胞骨架重排和内皮细胞收缩。在T细胞上，ICAM-1活化与CD3结合能诱导幼稚T细胞增殖和Th1 (IL-2 / IFN- γ) 细胞因子释放。第三，ICAM-1作为“被动配体”可以促进特定LFA-1介导的活动。这些包括产生分泌细胞因子的炎症效应物CD4 + T细胞，以及在整合素连接和聚类后的相同细胞酪氨酸激酶生长因子受体的反式激活 (调节)。

检测原理

本实验采用双抗体夹心 ELISA。用抗大鼠 ICAM-1/CD54 单克隆抗体预包被酶标板，加入适度稀释的样本和标准品，其中的 ICAM-1/CD54 会与其单抗结合，洗去游离成分；加入生物素化的抗大鼠 ICAM-1/CD54 抗体，抗大鼠 ICAM-1/CD54 抗体与结合在单抗上的大鼠 ICAM-1/CD54 结合而形成免疫复合物，洗去游离的成分；加入辣根过氧化物酶标记的亲合素，生物素与亲合素特异性结合，洗去未结合的酶结合物；加入显色剂，若反应孔中有 ICAM-1/CD54，辣根过氧化物酶会使无色的显色剂现蓝色；加终止液变黄。在 450nm 下测 OD 值，ICAM-1/CD54 浓度与 OD450 值之间呈正比，可通过绘制标准曲线计算出标本中 ICAM-1/CD54 浓度。

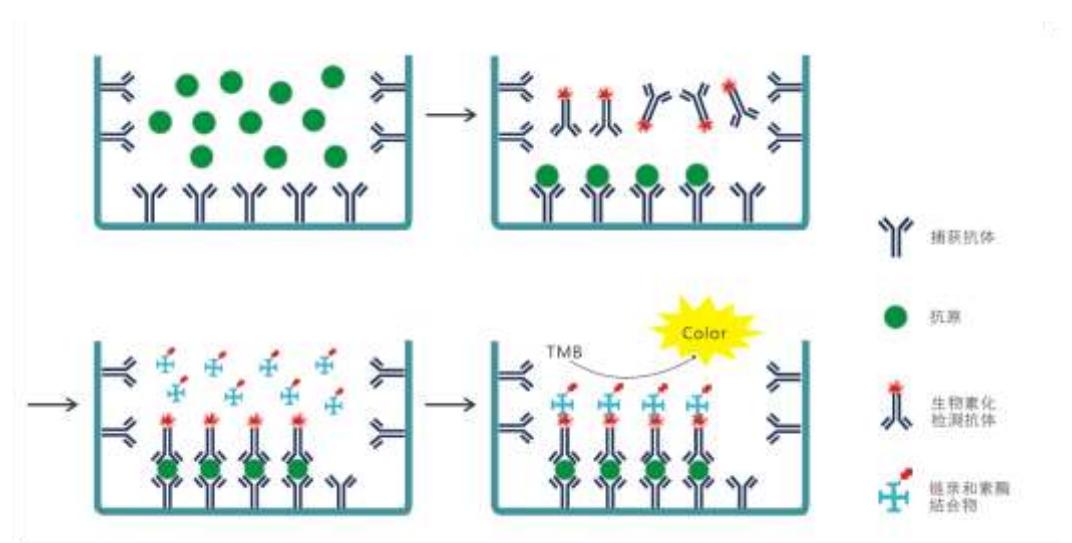

检测原理示意图

试剂盒组分

试剂盒组分	96 孔	48 孔	配制
1a 标准品	2 支	1 支	按说明书进行稀释
1b 标准品和标本稀释液	2 瓶	1 瓶	即用型
2a 浓缩生物素化抗体	2 支	1 支	按瓶签标识进行稀释
2b 生物素化抗体稀释液	1 瓶	1 瓶	即用型
3a 浓缩酶结合物（避光）	2 支	1 支	按瓶签标识进行稀释
3b 酶结合物稀释液	1 瓶	1 瓶	即用型
4 浓缩洗涤液 20×	1 瓶	1 瓶	按瓶签标识进行稀释
显色剂（避光）	1 瓶	1 瓶	即用型
终止液	1 瓶	1 瓶	即用型
抗体包被板条	8×12	8×6	即用型
封板胶纸	4 张	2 张	即用型
说明书	1 份	1 份	

如果您收到试剂盒后发现上表中有任何组分破损或缺失,请及时联系我司客服 400-7060-959 或 tech@4abio.com。我们将及时为您解决相关问题。

储存条件

未启封的试剂盒		4℃保存, 请于保质期内使用。	
已 启 封 或 重 新 溶 解 的 试 剂	1b 标准品和标本稀释液	可以整盒放入 4℃储存 1 个月。 2a 浓缩生物素化抗体 (100×) 2b 生物素化抗体稀释液 3a 浓缩酶结合物 (避光 100×) 3b 酶结合物稀释液 4 浓缩洗涤液 20× 显色剂 (避光) 终止液 标准品 抗体包被板条	2a 浓缩生物素化抗体和 3a 浓缩酶结合物需现用现配。 4℃或常温保存 重溶后分装, -20℃存放一个月, 避免反复冻融。稀释后的标准品使用后应丢弃, 不得重复使用。 实验中不用的板条应立即放回包装袋中, 密封干燥 4℃保存。
	2a 浓缩生物素化抗体 (100×)		
	2b 生物素化抗体稀释液		
	3a 浓缩酶结合物 (避光 100×)		
	3b 酶结合物稀释液		
	4 浓缩洗涤液 20×		
	显色剂 (避光)		
	终止液		
	标准品		

以上储存条件均要求在试剂盒保质期内。

其他实验材料 (不提供, 但可协助购买) :

1. 酶标仪(450nm)
2. 高精度可调移液器及吸头: 0.5-10, 2-20, 20-200, 200-1000μl; 一次检测样品较多时, 最好用多通道移液器。
3. 自动洗板机或洗瓶
4. 37℃温箱
5. 双蒸水或去离子水
6. 坐标纸
7. 量筒

注意事项

1. 试剂盒保存在2-8℃, 除复溶后的标准品, 其它成分不可冷冻。
2. 浓缩生物素化抗体(2a)、浓缩酶结合物(3a)装量极少, 运输中颠簸和可能的倒置会使液体沾到管壁或瓶盖。使用前请离心处理以使附着于管壁或瓶盖的液体沉积到管底。
3. 为避免交叉污染请使用一次性吸头。
4. 终止液和显色剂具腐蚀性, 避免皮肤及粘膜直接接触, 一旦接触到这些液体, 请尽快用大量水冲洗。
5. 使用干净的塑料容器配制洗涤液, 使用前充分混匀试剂盒里的各种成份及样品。
6. 洗涤酶标板时应充分拍干, 不要将吸水纸直接放入酶标反应孔中吸水。
7. 不要用其它来源的试剂混合或替代该产品的组分, 不同批号的试剂盒组份不能混用, 请在有效日期内使用本产品。

8. 在试验中标准品和样本检测时建议作双复孔或三复孔，加入试剂的顺序应一致，以保证所有反应孔孵育的时间一样。
9. 充分混匀对反应结果尤为重要，最好使用微量振荡器(使用最低频率进行振荡)。
10. 避免操作过程中酶标板干燥，干燥会使酶标板上生物成分迅速失活，影响实验结果。
11. 适当的稀释样品，使样品值落在标准曲线范围内，根据待测因子含量高、中、低的不同，建议采用1:100, 1:10, 1:2稀释样品。如果样品OD值高于最高标准，适当增加稀释度并重复检测。
12. 标准品稀释液、操作人、移液方式、洗涤方法、孵育时间及温度、试剂盒批次的不同均可能会导致结果的差异。
13. 此法可有效的消除可溶性受体、结合蛋白以及生物样品中的其他因素的干扰。

样本收集处理及保存方法


1. **血清**：使用不含热原和内毒素的试管，收集血液后，室温凝血30min， $1000\times g$ 离心10min，小心分离血清。
2. **血浆**：用EDTA、柠檬酸盐、肝素作为抗凝剂收集血浆，收集后30min内以 $1000\times g$ 离心15min去除颗粒。
3. **细胞上清液**： $1000\times g$ 离心10min去除颗粒和聚合物。
4. **保存**：若样品不立即检测，请将其按一次用量分装，-20℃—70℃保存，避免反复冻融。尽量避免使用溶血或高血脂样本。如果血清中含有大量颗粒，检测前先离心或过滤去除；室温下解冻，请勿于37℃或更高的温度加热解冻。
5. **稀释**：可根据实际情况，将标本做适当倍数稀释(建议做预实验，以确定稀释倍数)。

注：正常大鼠血清或血浆样本建议做1:2稀释。

试剂准备

1. 提前30min从冰箱中取出试剂盒，平衡至室温。
2. **洗涤缓冲液**：从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶，这属于正常现象，加热并轻轻摇晃使结晶完全溶解后再配制。将浓缩洗涤液用双蒸水稀释(1:20)。未用完的放回4℃。
3. **标准品**：加入标准品/标本稀释液(1b)1ml 至冻干标准品(1a)中，待彻底溶解后，静置 15 分钟混匀(浓度为4000pg/ml)，然后根据需要进行稀释，见下图(建议标准曲线使用以下浓度：4000、2000、1000、500、250、125、62.5、0 pg/ml)。稀释的标准品不得重复使用，未用完的标准品应按照一次用量分装后，将其放在-20~-70℃贮存，一次性使用，避免反复冻融。

标准品稀释方法：

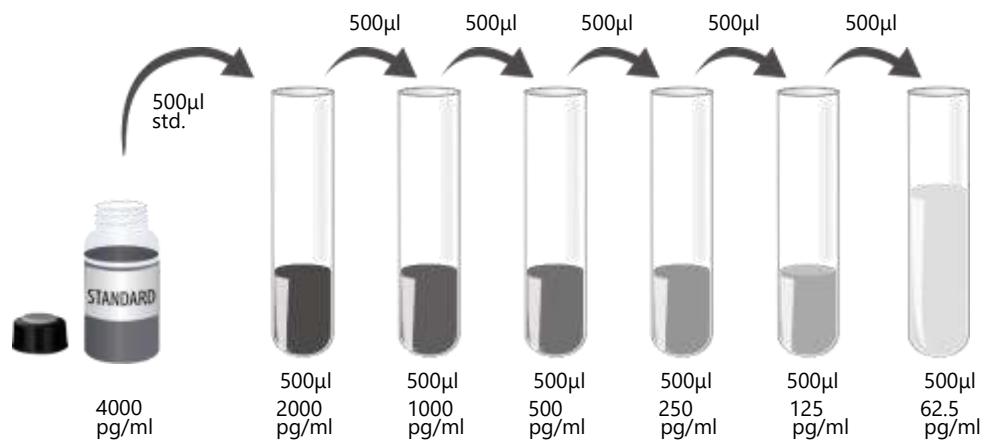

4. **生物素化抗体工作液：**根据每孔需要100μl来计算总的用量，多配制100-200μl。以生物素化抗体稀释液(2b)稀释浓缩生物素化抗体(2a)(1:100)。最好现用现配。(稀释方法见下表)

所用板条数	浓缩生物素化抗体	生物素化抗体稀释液
12	110μL	+ 10890μL
10	90μL	+ 8910μL
8	70μL	+ 6930μL
6	50μL	+ 4950μL
4	33μL	+ 3267μL
2	17μL	+ 1683μL
1	9μL	+ 891μL


5. **酶结合物工作液：**以酶结合物稀释液(3b) 稀释浓缩酶结合物(3a)(1:100)。最好现用现配。(稀释方法见下表)

所用板条数	浓缩酶结合物	酶结合物稀释液
12	110μL	+ 10890μL
10	90μL	+ 8910μL
8	70μL	+ 6930μL
6	50μL	+ 4950μL
4	33μL	+ 3267μL
2	17μL	+ 1683μL
1	9μL	+ 891μL

操作步骤

1. 按照上述准备工作配制好各种溶液。
2. 根据待测样品数量和标准品的数量决定所需的板条数，并增加1孔作为空白对照孔。分别将标本和不同浓度标准品(100 μ l /孔)加入相应孔中（零孔只加标准品/样本稀释液），用封板胶纸封住反应孔，37℃孵育90分钟（空白对照孔除外）。
3. 洗板4次：(1)自动洗板机：要求注入的洗涤液为350 μ l，注入与吸出间隔15-30秒。(2)手工洗板：甩尽孔内液体，每孔加洗涤液350 μ l，静置30秒后甩尽液体，在厚迭吸水纸上拍干。
4. 加入生物素化抗体工作液(100 μ l /孔)。用封板胶纸封住反应孔，37℃孵育60分钟（空白对照孔除外）。
5. 洗板4次。
6. 加入酶结合物工作液(100 μ l /孔)。用封板胶纸封住反应孔，37℃孵育30分钟（空白对照孔除外）。
7. 洗板4次。
8. 加入显色剂100 μ l /孔，避光，37℃孵育10-20分钟。
9. 加入终止液100 μ l /孔，混匀后即刻测量OD450值(5分钟内)。

操作流程图

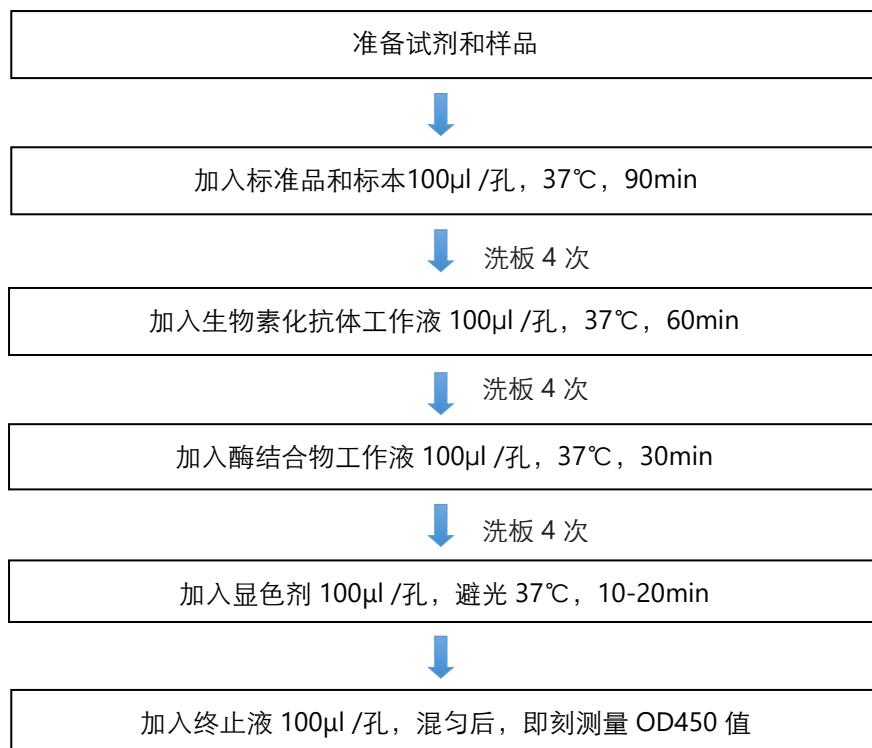

操作要点提示

1. 配制各种试剂时要充分混匀，但要避免产生大量泡沫，以免加样时加入大量的气泡，产生加样误差。
2. 为避免交叉污染，在加入不同浓度的标准品、不同样品、不同试剂时谨记及时更换吸头。
3. 为了确保准确的结果，在每次孵育前均需使用新封板胶纸封住反应孔。


4. 显色剂在添加之前，应保持无色，请勿使用已变为蓝色的显色溶液。最佳显色时间对标准曲线很重要，肉眼可见前3-4孔有梯度蓝色，后3-4孔差别不明显，零孔无蓝色出现即可终止。
5. 每次检测均要做标准曲线，根据样品待测因子的含量，适当稀释或浓缩样本，最好做预实验。

结果判断

1. 每个标准品和标本的OD值应减去空白孔的OD值，如果做复孔，求其平均值。
2. 使用计算机软件以吸光度OD值为纵坐标(Y)，相应的标准品浓度为横坐标(X)，生成相应的标准曲线，样品待检物含量可根据其OD值由标准曲线换算出相应的浓度。
3. 若标本OD值高于标准曲线上限，应适当稀释后重测，计算浓度时应乘以稀释倍数算标本含量。
4. 参考数据：

标准品浓度(pg/ml)	OD值1	OD值2	平均值	矫正值
0	0.049	0.045	0.047	--
62.5	0.132	0.126	0.129	0.082
125	0.198	0.202	0.200	0.153
250	0.337	0.324	0.331	0.284
500	0.583	0.595	0.589	0.542
1000	1.008	1.018	1.013	0.966
2000	1.625	1.612	1.619	1.572
4000	2.634	2.613	2.624	2.577

数据仅供参考，不同用户最佳显色时间会有所不同

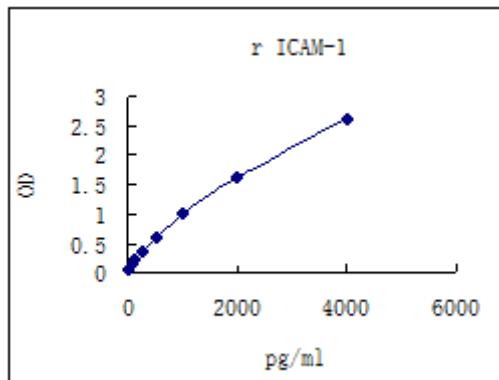

本图仅供参考，应以同次试验标准品所绘标准曲线为准

结果重复性

板间，板内变异系数均<10%。

灵敏度

最低检测大鼠 ICAM-1/CD54 剂量小于 32 pg/ml。 最低检出量测定方法：20 个零标准的平均 OD 值增加两个标准差，再计算相应的浓度。

特异性

此试剂盒可检测天然和重组的大鼠 ICAM-1/CD54，以 50ng/ml 平行做特异性试验，均不与下列细胞因子及蛋白反应。

重组人细胞因子	重组小鼠细胞因子
ICAM-1/Fc Chimera	ICAM-1/Fc Chimera
ICAM-3/Fc Chimera	ICAM-2/Fc Chimera
	ICAM-5/Fc Chimera
	MAdCAM-1/Fc Chimera
	VCAM-1/Fc Chimera

参考文献

1. Carlos, T.M. and J.M. Harlan (1994) Blood 84:2068.
2. Hogg, N. et al. (1991) Chem. Immunol. 50:98.
3. Kita, Y. et al. (1992) Biochim. Biophys. Acta 1131:108.
4. Thompson, P.W. et al. (2002) J. Immunol. 169:1007.
5. Pluskota, E. and S.E. D'Souza (2000) Eur. J. Biochem. 267:4693.
6. Reilly, P.L. et al. (1995) J. Immunol. 155:529.
7. Jun, C-D. et al. (2001) J. Biol. Chem. 276:29019.
8. Jun, C-D. et al. (2001) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 98:6830.
9. Fiore, E. et al. (2002) Oncogene 21:5213.
10. Champagne, B. et al. (1998) J. Immunol. 161:6398.
11. Miller, J. et al. (1995) J. Exp. Med. 182:1231.
12. Van den Engel, N.K. et al. (2000) Blood 95:1350.
13. Horley, K.J. et al. (1989) EMBO J. 8:2889.